

**ОДЕЯЛО
С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ
«ТЕРМАТИКА»
Модель NT -201t
(с таймером)**

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Термоодеяло предназначено для процедур обёртывания и для обеспечения теплового воздействия на пациента при проведении различных косметологических процедур в салонах красоты, медицинских центрах и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термоодеяло с блоком управления	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Сумка	1 шт.

3. ОПИСАНИЕ

Термоодеяло выполнено в виде мягкого покрывала с встроенным внутренним нагревателем с термодатчиками. Внутреннее и внешнее покрытия одеяла изготовлены из влагонепроницаемой и влагоотталкивающей износостойкой ткани. Термоодеяло имеет три автономных зоны нагрева: для груди (зона 1), для живота (зона 2) и для ног (зона 3). Каждая из зон может отдельно включаться или выключаться (щелчок рукоятки управления рис.1 ②) , а также регулироваться по степени нагрева в пределах 30-65°С .


Контроль температуры нагрева термоодеяла осуществляется с помощью датчиков температуры, которые размещаются внутри термоодеяла. Регулирование температуры производится с помощью ручек управления на фронтальной панели блока управления. Контроль времени проведения процедуры осуществляется с помощью таймера, что на фронтальной панели блока управления (рис.1 ①).

Данная модель одеяла сконструирована с учетом рекомендаций фитнес-клубов для обеспечения более плотного обертывания независимо от размера и типа фигуры пациента.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания сеть	220 В, 50 Гц
Напряжение питания нагревателей	220 В
Потребляемая мощность не более	200 Вт
Длина термоодеяла (от ворота)	185 см
Ширина термоодеяла	190 см
Масса термоодеяла с блоком управления не более	3.8 кг

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

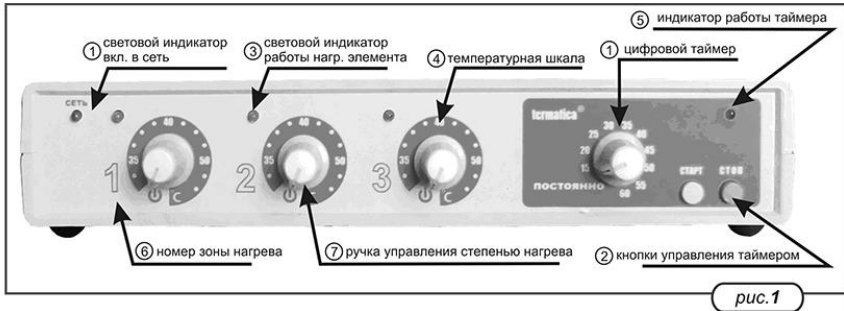

Для проведения косметологических процедур одеяло раскладывается на рабочем месте.

Проводится очистка наружной поверхности одеяла от загрязнения мощным раствором или раствором спирта 70°, а затем - дезинфекция, например, раствором МИКРОЦИДа или другим.

Блок питания располагается вблизи сетевой розетки в любом удобном месте.

Перед размещением пациента одеяло предварительно прогревается в течение 5-7 минут, для чего: вилку блока питания вставляют в сетевую розетку, включают общее питание (рис.2 ①), красный индикатор питания на задней панели (рис.2 ①) горит. Ручку задатчика времени таймера устанавливают в положение «ПОСТОЯННО» и включают таймер нажатием кнопки «СТАРТ».

Рабочий режим термоодеяла. Регуляторы температуры (рис.1 ⑦), соответствующих необходимых для процедуры зонам (рис.1 ⑥), устанавливают в положение по часовой стрелке на необходимой температуре, ориентируясь по температурной шкале (рис.1 ④).

Например, чтобы задать нагрев 2 зоны (живот) до температуры 40°C необходимо положение указателя на ручке управления (рис.1②) второй зоны поставить против 40 температурной шкалы. Световые индикаторы (рис.1③), расположенные на панели управления над цифрами, соответствуют зонам одеяла и после вкл. таймера указывают интенсивность нагрева. Горящий зеленый индикатор указывает, что зона прогревается. При отключении какой-либо секции или когда зона нагрета до необходимой температуры и для дальнейшего нагрева нет необходимости, - соответствующий индикатор будет погашен.

Когда одеяло прогрелось до нужной температуры, пациент размещается на термоодеяле. При этом температура внутри одеяла упадет на 2-3°C и восстановится через 4-5 минут. Температура в неработающих зонах одеяла во время процедуры не превышает 28-29°C.

Регулятором управления цифрового таймера (рис.1①) задается необходимое время для проведения процедуры. Кнопкой **СТАРТ** таймер начинает отсчитывать обратное время. Внимание! При нажатии кнопки **СТОП все зоны нагрева отключатся от питания и таймер остановится.**

После проведения процедуры выключаются работавшие секции одеяла переводом ручек управления против часовой стрелки до щелчка. Выключается общее питание (на задней панели блока питания (рис.2 ①).), вилка шнура питания вынимается из сетевой розетки. В случае загрязнения поверхность одеяла очищается как указано выше.

ВНИМАНИЕ! Процедуры с использованием термоодеяла нельзя проводить с пациентами, имеющими повышенную чувствительность к теплу, заболевания периферийной системы кровообращения, находящимися под воздействием алкоголя, наркотических, седативных или снотворных препаратов. Пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, должны перед процедурой проконсультироваться у своего врача.

Применение данного устройства запрещено для беременных женщин, детей, пожилых людей и людей с чувствительной кожей. При длительном применении проконсультируйтесь у врача.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется включать блок управления термоодеяла в сеть через стандартный стабилизатор напряжения.

Для правильной эксплуатации необходимо соблюдать следующие требования:

- не производить самостоятельно ремонт изделия в том случае, если оно перестало нагреваться;
- при работе с изделием не складывать его в несколько слоев;
- не повреждать материю изделия; регулярно осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить эксплуатацию изделия;
- не пытаться вскрыть блок управления или разъединить застежку «велькро», находящуюся между двух половин одеяла, - тем самым вы нарушите гарантийные пломбы.

6. ХРАНЕНИЕ

Одеяло хранится в разложенном состоянии или свернутым в рулон в упаковке.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации одеяла - бессрочная. Гарантия не распространяется на термоодеяло и блок питания с нарушенными гарантийными пломбами, а также на случаи нарушений условий эксплуатации изделий.